

FUJIIRYOKI

からだに、美容に、おいしさに。 7つの水をつくる「トレビ」。

明日の健康のベースとなるもの。それは、毎日の暮らしに欠かせない「水」にこだわること。飲む水、食事に使う水、暮らしを清潔に保つ水……。健やかな暮らしを、水を見直すことから始めませんか。アルカリイオン整水器「トレビ」がお手伝いします。

アルカリイオン水の効能・効果

胃腸症状 の改善

胃もたれ

胃の
不快感を
やわらげる

胃腸の
働きを
整える

お通じを
良好に

アルカリイオン水の大きな特長は、胃腸症状改善に働きかけることです。代表的な例として、胃もたれなど、胃の不快感をやわらげるなどの効果が認められています。毎日、飲み続けることで、気になる胃腸の症状を少しずつやわらげます。

アルカリイオン整水器 F8

トレビ®

FW-405

ALKALINE IONIZED WATER APPARATUS



7つの水

● pH10.5 強アルカリ
野菜のアク抜きなど、料理の下ごしらえに。

● pH9.5 アルカリ 3
料理やお茶など、ひと味違うおいしさに仕上げます。

● pH9.0 アルカリ 2
米とぎ、炊飯に。ご飯をふっくら炊きあげます。

● pH8.5 アルカリ 1
アルカリイオン水の飲みはじめは、ここから。

● 浄水
薬や赤ちゃんのミルクに、おすすめです。

● 酸性水 [pH5.5]
お肌を引き締める、洗顔水としても利用できます。

● 衛生水 [pH2.5]
キッチンや浴室の洗浄除菌に使えます。

飲用アルカリイオン水

オートクリーニング機構

◎リアルタイムリフレッシュ機能
電極の極性を瞬時に入れ替えることで、電極板へのカルシウムの付着を減らし、電解能力をバックアップします。

◎オートフレッシュ機能
アルカリイオン水の積算生成量が10Lを超えた止水10分後に、自動的に10秒間の逆電解を行います。

電解能力をアップする、Hiモード

pHの出にくい地域では、Hiモードにより電解能力をアップさせることができます。Hiモードを選択すると、pHの実力値が約0.5アップします。

※含炭水素を使用している当社調べ



毎分約 5.5L の水量

年間
約2.5t
節水

さらに

水という資源を大切にしました。◎ 使用電力を最小限にしました。◎ 新開発、高効率電解槽を搭載。

アルカリ生成水量がアップ。

20Lのアルカリイオン水の生成に対して、酸性水（排水量）が当社従来機種に比べて、約4分の1に、年間約1.1tの節水が可能になりました（当社比※1）。浄水モードでは排水はされません。

通水始めの捨て水をゼロにする「捨て水ゼロモード」。

アルカリ1、2、3の場合、10分以内に再使用すると捨て水なしで使用できます※2。捨て水ゼロモードにより、年間約1.4tの節水ができます（当社比※3）。

待機電力を1/7にカット。

待機電力 = 約3Wから約0.4Wに

待機電力を従来の約3Wから約0.4Wに低減しました。節電機能で、環境にも家計にもやさしいトレビです。

自動電源ON/OFF機能を採用。

無駄な電気をカット！

通水すると自動的に電源がONになります。また使用後10分後に電源がOFFになり、手間なく電気代の節約ができます。

話題の「溶存水素量」が、80%アップ。

新しいトレビは5枚の電極、高効率電解槽を新採用。電解能力がアップすることにより、業界最大レベルの吐水量を維持しながら、同時に排水量を抑え、さらには従来の機種より80%も高い溶存水素たっぷりのアルカリイオン水を生成することが可能になりました。（FW-205比較）

たっぷり使える毎分約5.5Lの水量。

飲んだり、米とぎや野菜洗いなど、料理に使ったり。毎分約5.5Lという余裕の水量は、業界最大クラス。だから水量を気にすることなくお使いいただけます。

※1 アルカリイオン水を1日20L生成するとして1日の排水量3L×365日

（アルカリ1・2・3を連続した場合のみ）

※2 強アルカリイオン水 酸性水を生成した場合は、捨て水ゼロモードにはなりません。

※3 10分以内の再使用が1日8回あるとして（11L×800ml）。

JA/JAグループ

フジ医療器はチーム・マイナス6%に参加しています。




みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

ダブルカートリッジだから機能別に交換が可能。

カルキ臭や総トリハロメタン※1は活性炭で、水に含まれるシマジン（農薬）は繊維状活性炭でしっかりキャッチ。ミネラル分はそのまま、クリーンな水をつくります。

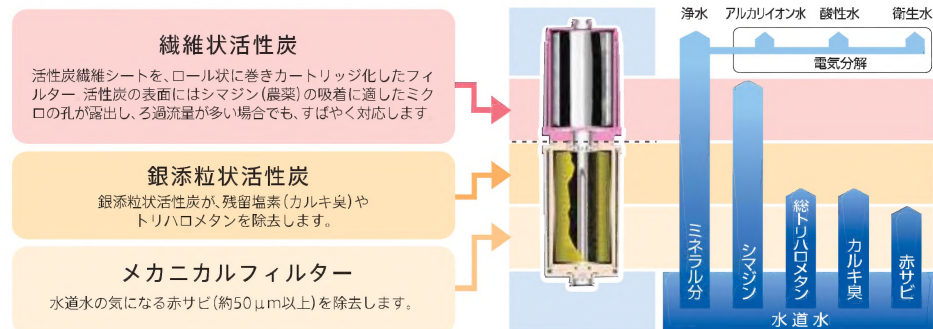

※1 総トリハロメタンとは、クロロホルム、プロモクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルムの4種類の化合物の総称です。

アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。



AAIWA アルカリイオン整水器
協議会ホームページ


<http://www.3aaa.gr.jp/>

- アルカリイオン整水器協議会 (AAIWA) は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
- アルカリイオン水の効能・効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行なっています。

株式会社フジ医療器は、アルカリイオン整水器協議会へ加盟しています。

上下どちらかの交換で、ランニングコストをダウン。

交換時には、上のカートリッジを濁り除去に優れたFW-02Cに換えることもできます。また、上下どちらか交換時期のきた方だけを交換できるため、ランニングコストも抑えます。

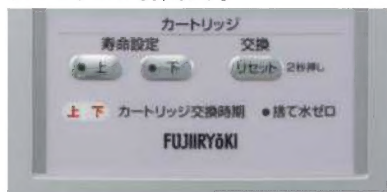

操作パネルの表示で、交換時期もすぐにわかります。
※画像のランプ点灯はイメージです。

●FW-405専用選択カートリッジ

	型式	希望小売価格
標準	繊維状活性炭+活性炭 FW-01ST (FW-02S + FW-03T)	14,175円 (税抜:13,500円)

●FW-405専用交換カートリッジ

カートリッジ交換時は、上カートリッジが中空糸膜タイプ「FW-02C」が繊維状活性炭「FW-02S」の2種類から選べます。

	型式	希望小売価格	浄水能力				交換時期の目安※3
			造粒活性炭※1	総トリハロメタン※1	シマジン(農薬)※1	濁り※2	
上 標準	繊維状活性炭 FW-02S	7,875円 (税抜:7,500円)			16,000L		約1年 (40L/日使用時)
下 標準	活性炭 FW-03T	7,875円 (税抜:7,500円)	16,000L	6,000L			
上 オプション	中空糸膜 FW-02C	7,875円 (税抜:7,500円)				16,000L	

●カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質水圧により大幅に短くなる場合があります。
(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なく、寿命が短くなる場合があります。)

※1 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験で除去率80%の値

※2 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験でろ過流量50%の値

※3 カートリッジの寿命設定が総トリハロメタンの時は、40L/日使用で約5か月になります。

FW-405

アルカリイオン整水器F8 [管理医療機器]
医療機器認証番号 221AKBZX00045000



- 【同梱付属品】
- 分岐栓
 - 分岐栓取り付け用付属品
 - グリセリン酸カルシウム
 - 衛生水生食用食塩
 - pH測定液セット 他

仕様

- 本体寸法(約)／幅255×奥行120×高さ347mm
- 質量(約)／6.6kg(満水時)
- 定格／AC100V(50-60Hz)
- 消費電力／250W(待機時:約0.4W)
- 電源コード(約)／2.5m
- 給水方式／吐水蛇口分岐栓
- 給水接続／レバー切替
- 使用可能水道圧／約70～750kPa [約0.7～7.5kgf/cm²]
- 電解
 - ＜電解能力切替＞アルカリ性4段階、酸性1段階、衛生水1段階
 - ＜処理水量＞
 - [アルカリ1,2,3 動水圧100kPa(約1kgf/cm²)]の場合
 - 吐水量(約)／アルカリイオン水 :2.65L/分
 - 排水量(約)／酸性イオン水 :0.15L/分
 - 浄水時(約)／ :2.8L/分
 - [アルカリ1,2,3 動水圧350kPa]の場合
 - 吐水量(約)／アルカリイオン水 :5.50L/分
 - 排水量(約)／酸性イオン水 :0.29L/分
 - 浄水時(約)／ :5.8L/分

●浄水カートリッジ:

- ＜ろ過材料＞銀添粒状活性炭、繊維状活性炭、メカニカルフィルター
- ＜能力＞残留塩素のろ過水量:約16,000L※1
- 総トリハロメタンのろ過水量:約6,000L※1
- シマジン(農薬)のろ過水量:約16,000L※1

※1家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験で除去率80%の値

＜寿命＞残留塩素・シマジンを対象とした場合:
約1年間(1日の使用水量約40Lとして)
総トリハロメタンを対象とした場合:
約5ヶ月間(1日の使用水量約40Lとして)

S(シルバー)

メーカー希望小売価格: **260,400円**(税抜:248,000円)
〈別売品〉グリセリン酸カルシウム(15g入り) 標準価格:1,155円(税込)



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■アルカリイオン整水器のご注意

●腎疾患(腎不全、カリウム排泄障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体の弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1～2杯)、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。

●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。



使用上のご注意

●水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジ寿命に差がでます。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎ 0120-027-612
URL: <http://www.fujiiryoki.com>



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成21年4月現在のものです。

●お求めは...